

Per i pazienti con osteoartrosi del ginocchio

50K90 Agilium Softfit

A prescindere dall'indicazione, le abitudini quotidiane dell'utente e le preferenze di design personale giocano un ruolo fondamentale nella selezione dell'ortesi per i pazienti con artrosi del ginocchio. L'ortesi per ginocchio Agilium Softfit incrementa il portafoglio esistente della linea Agilium con un altro nuovo prodotto.


Si tratta di un'ortesi costituita da una ginocchiera in tessuto ed un'articolazione per lo scarico del compartimento mediale o laterale del ginocchio. Basata sul principio dei 3 punti, è adatta per il trattamento antalgico in caso di varismo o di valgismo dell'articolazione di ginocchio. E' disponibile sia per l'arto sinistro che per il destro.

I vantaggi a colpo d'occhio:


- Principio dimostrato dei 3 punti;
- Può essere adattato al paziente rapidamente e facilmente in pochi passaggi;
- Adattamento dell'ortesi in caso di varismo o valgismo regolando l'articolazione;
- Buona vestibilità e sistema antiscivolo grazie alla tramatura antiscivolo del tessuto.



La forza correttiva dell'ortesi può essere impostata con la vite a brugola sopra l'articolazione dell'ortesi. In questo modo è facile regolare l'angolo varo/valgo dell'ortesi.

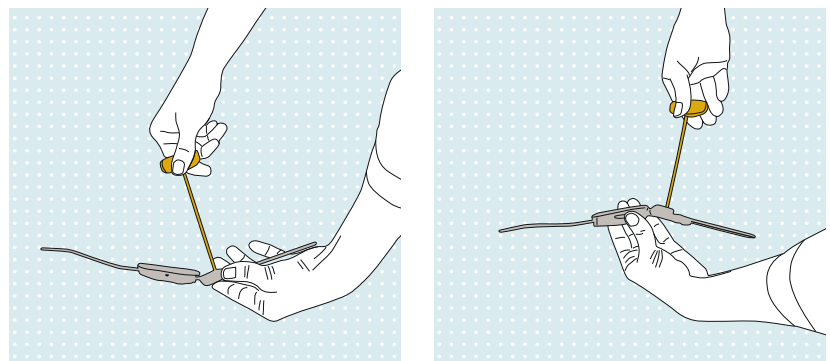

Dati tecnici

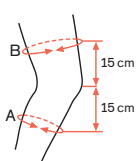

Circonferenza		S (DX/SX)	M (DX/SX)	L (DX/SX)	XL (DX/SX)	XXL (DX/SX)
A	cm	35 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 48	48 – 51
B	cm	44 – 48	48 – 52	52 – 56	56 – 61	61 – 67